

Аппараты для лечения дистальной окклюзии (Класс II)

SUS ² – Универсальная пружина Саббаха	страница 244
Аппарат Гербста/ Наборы	страница 246
Аппарат Гербста/ Аксессуары	страница 248



Класс II Apparatus

Первым классом в Класс I



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■**
- Внутри - и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

SUS2
Sabbagh Universal Spring

Улучшенное лечение Класса I



SUS2 – Первокласное лечение для ваших пациентов с дистальной окклюзией

- Универсальный аппарат одного размера, который подходит всем пациентам и не имеет различий для правой и для левой сторон.
- Удобство в обращении и установке
- Легкое и безопасное крепление к дуге
- Разные типы активации для разных показаний:
 - SUS2 как шарнир: активация с одной или несколькими щелевыми распорками (1 мм / 2 мм) на стержне
 - SUS2 как пружина: вы сможете использовать турбо-пружину в тех случаях, когда требуется большее усилие (лечение взрослых) или в случае, если зубной камень мешает функционированию внутренней пружины
- Улучшенная гигиеничность для пациента благодаря коррозионно-устойчивым материалам и открытым трубкам
- Отличная переносимость и комфорт за счет свободы движений нижней челюсти
- Мягкое и непрерывное силовое воздействие наряду с работой на брекет-системе позволяют сократить время лечения (оно составит всего около 6 месяцев)

Аппараты для Класс II




Универсальная пружина Саббаха - SUS2 – это телескопический аппарат для лечения Класс II. Он устанавливается с внутренней стороны щеки. Это прекрасный выбор при лечении пациентов для которых проблематично использование внешних аппаратов. SUS2 оказывает постоянное воздействие слабыми силами на височно-нижнечелюстной сустав и в ряде случаев помогает избежать удаления зубов и хирургического вмешательства.

Показания:

- Дистальная окклюзия (ретрогнатия) / Класс II (одно / двусторонняя)
- Дистализация моляров (альтернатива использованию лицевой дуги)
- Закрытие промежутков в зубном ряду (диастемы)
- Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
- Лечение синдрома ночного апноэ
- Достижение зубо-альвеолярной компенсации при лечении аномалии окклюзии (вместо применения эластических тяг)

Идеальное решение для:

- пациентов с низкой приверженностью к лечению
- пациентов с низким остаточным потенциалом роста
- пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей или бронхиальной астмой
- пациентов с аллергией на пластмассу (акрил)

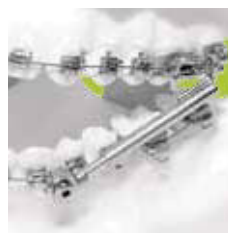

Аппараты для Класс II

Функциональный несъёмный телескопический аппарат Гербста.

Безопасно, проверено, эффективно



Классическое лечение дистальной окклюзии.

Дентаурум предлагает функциональный несъёмный телескопический аппарат Гербста в четырех вариациях. Все они отличаются высокой механической стабильностью и превосходным дизайном, что позволяет развивать нужную силу и при этом сохранять потенциал для эффективного ортодонтического лечения.





Herbst TS.

Эта модель имеет внутреннюю телескопическую конструкцию, которая предотвращает скольжение петель.

Herbst I.

Классическая модель аппарат Гербста(Herbst®) для приварки к кольцам.

В зависимости от целей доктора при лечении, аппарат Гербста от Дентаурум подходит и для кольцевой и для литой техник. Это дает максимум свободы в выборе оптимального лечения.

Herbst II.

Модифицированный аппарат Гербста(Herbst®) для использования с несъемными устройствами.

Herbst IV.

Модифицированный аппарат Гербста(Herbst®) с головкой, шарнирной полостью и С - образным зажимом для увеличения объема боковых движений нижней челюсти. Такое решение дает возможность для движений нижней челюсти во время лечением аппаратом Гербста(Herbst®) в полном объеме и создаёт большой комфорт для пациента. С - Клипсы позволяют избежать занимающего много времени размещения специальных ключей. Все это делает Herbst IV простым и удобным в использовании.

Аппараты для Класс II

SUS² – Универсальная пружина Саббаха



SUS² – Стартовый набор
Включает CD-диск



Артикул **607-140-01** 1 набор

☪ 0483

Содержит:

2 x SUS2 телескопический элемент	Артикул 607-147-00
2 x SUS2 телескопический стержень, собранный	Артикул 607-148-00
2 x SUS2 шариковая подпора, ø 1.0 мм	Артикул 607-136-00
2 x SUS2 турбо пружина (нержавеющая сталь), длина 22 мм	Артикул 607-146-00
2 x С-образных кольца, длина 1 мм	Артикул 607-103-11
2 x С-образных кольца, длина 2 мм	Артикул 607-104-11
1 x Шестигранный ключ	Артикул 607-144-00



SUS² – набор
Шестигранный ключ в набор не входит!



Артикул **607-145-01** 1 набор

☪ 0483

Содержит:

2 x SUS2 телескопические элементы	Артикул 607-147-00
2 x SUS2 телескопический стержень, собранный	Артикул 607-148-00
2 x SUS2 шариковая подпора, ø 1.0 мм	Артикул 607-136-00
2 x SUS2 турбо пружина (нержавеющая сталь), длина 22 мм	Артикул 607-146-00
2 x С-образных кольца, длина 1 мм	Артикул 607-103-11
2 x С-образных кольца, длина 2 мм	Артикул 607-104-11



SUS² телескопический стержень, собранный

Артикул **607-148-00** 2 шт

☪ 0483

Содержит:

2 x SUS 2 адаптер дуги/крепежный винт (2 пары)	Артикул 607-143-00
2 x SUS2 телескопический стержень	Артикул 607-149-00



SUS² телескопический стержень

Артикул **607-149-00** 2 шт

☪ 0483



SUS² адаптер дуги/крепежный винт

Артикул **607-143-00** 1 пара

☪ 0483



SUS² телескопические элементы
(с шестигранным ключом)

Артикул **607-147-00** 1 шт

☪ 0483



SUS² турбо-пружина (нержавеющая сталь)
Длина: 22 мм

Артикул **607-146-00** 6 шт

☪ 0483

Аппараты для Класс II

SUS² – Универсальная пружина Саббаха

SUS² компрессионная пружина (нержавеющая сталь)

Длина: 15 мм

Артикул **607-141-00** 6 шт
CE 0483



SUS 2 компрессионная пружина (никель-титановый сплав)

Длина: 15 мм

Артикул **607-150-00** 6 шт
CE 0483



SUS 2 дистанционная пружина

Длина: 10 мм

Артикул **607-142-00** 6 шт
CE 0483



C-образное кольцо

Длина	Предназначены для	Артикул	Количество
1 мм	Herbst TS + SUS ²	607-103-11	10 шт
2 мм	Herbst TS + SUS ²	607-104-11	10 шт
3 мм	Herbst TS + SUS ²	607-105-11	10 шт
4 мм	Herbst TS + SUS ²	607-107-11	10 шт

CE 0483



Herbst TS / SUS² Щипцы для сжатия и откусывания C-образных колец (Herbst/SUS)

Стерилизуемые

Для зажима C-образных колец для Herbst TS и SUS²

Premium-Line 10 лет гарантии

Артикул **003-710-00** 1 шт
CE



SUS² шариковая подпора

Осовой Ø: 1.0 мм

Головной Ø: 2.10 мм

Длина: 18 мм

Артикул **607-136-00** 10 шт
CE 0483



Шестигранный ключ для SUS из стартового набора

Стерилизуемый

Ширина ключа: 1.5 мм

Артикул **607-144-00** 1 шт
CE



Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Наборы



Herbst TS набор

Телескопическая система для приваривания к ортодонтическим кольцам или литым шинам

Состав:

- 1 х телескопический стержень, правый
- 1 х телескопический стержень, левый
- 4 х шестигранных внутренних винта
- 4 х F-основания

Шестигранный ключ в комплект не входит

Длина	Артикул	Количество
20 мм	607-126-20	1 набор
22 мм	607-126-22	1 набор
24 мм	607-126-24	1 набор



Herbst I набор

С шестигранными внутренними винтами

Для приваривания к кольцам

Шестигранный ключ в комплект не входит



Артикул 607-120-00 1 набор

CE 0483

Содержит:

1 х телескопическая трубка, правая	Артикул 607-121-00
1 х телескопическая трубка, левая	Артикул 607-122-00
2 х телескопический стержень	Артикул 607-124-00
4 х шестигранных внутренних винтов	Артикул 607-122-30
4 х F-основания	Артикул 607-127-30



Herbst II набор

С шестигранными внутренними винтами

Для фиксации к дугам при использовании техники множественных изгибов

Шестигранный ключ в комплект не входит



Артикул 607-108-00 1 набор

CE 0483

Содержит:

1 х телескопическая трубка, правая	Артикул 607-121-00
1 х телескопическая трубка, левая	Артикул 607-122-00
2 х телескопический стержень	Артикул 607-124-00
2 х шестигранные внутренние винты, короткие	Артикул 607-108-10
2 х шестигранные внутренние винты, длинные	Артикул 607-108-20
4 х пистона	Артикул 607-111-00

Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста/ Наборы

Herbst IV набор

С шаровидной головкой

Для приваривания к кольцам.

Для большого латерального движения, с С-образным зажимом для удерживания штанги на месте. Не требует винтов.

Удобен для пациента.

Состоит из:

- 2 х телескопических трубок с головкой
- 2 х телескопических стержней с шаровидной головкой
- 2 х муфты для шаровидной головки
- 4 х основания
- 10 х С-образный зажим



Артикул 607-115-00

1 набор

CE 0483



Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Аксессуары



Шестигранные внутренние винты

Вариация	Предназначен для	Артикул	Количество
С основанием	Herbst TS / I	607-121-30	10 шт
Без основания	Herbst TS / I	607-122-30	10 шт
С короткими хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-108-10	10 шт
С длинными хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-108-20	10 шт

CE 0483



Щелевые винты

Вариация	Предназначен для	Артикул	Количество
С основанием	Herbst TS / I	607-101-00	10 шт
Без основания	Herbst TS / I	607-102-00	10 шт
С короткими хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-109-00	10 шт
С длинными хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-110-00	10 шт

CE 0483



С-образные зажимы

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
С-клипса	Herbst IV	607-116-00	10 шт

CE 0483

Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Аксессуары

Основание

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
F-основание, вогнутой формы	Herbst TS / I	607-127-30	10 шт
Основание, цилиндрической формы	Herbst TS / I	607-117-00	10 шт
Основание, изогнутая внутренняя форма	Herbst IV	607-118-00	10 шт
Пистон	Herbst II	607-111-00	10 шт



CE 0483

Телескопические трубки

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
Телескопическая трубка, правая	Herbst I / II	607-121-00	1 шт
Телескопическая трубка, левая	Herbst I / II	607-122-00	1 шт
Телескопическая трубка с шаровидной полостью	Herbst IV	607-125-00	1 шт



CE 0483

Телескопический стержень

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
Телескопический стержень	Herbst I / II	607-124-00	1 шт
Телескопический стержень с шаровидной головкой	Herbst IV	607-128-00	1 шт



CE 0483

Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Аксессуары



Кольца для закрытия пространства (спейсеры)

Для аппаратов Herbst I - IV.

Длина	Предназначен для	Артикул	Количество
1 мм	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 штг
2 мм	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 штг
3 мм	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 штг
4 мм	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 штг
5 мм	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 штг

CE 0483



C-образные кольца

Длина	Предназначен для	Артикул	Количество
1 мм	Herbst TS + SUS ²	607-103-11	10 штг
2 мм	Herbst TS + SUS ²	607-104-11	10 штг
3 мм	Herbst TS + SUS ²	607-105-11	10 штг
4 мм	Herbst TS + SUS ²	607-107-11	10 штг

CE 0483



Herbst TS / SUS² гнущие щипцы

Стерилизуемые

Для сжатия и откусывания C-образных колец (Herbst/ SUS²)

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-710-00** 1 штг

CE



Шестигранный ключ

Стерилизуемый

Ширина ключа	Предназначен для	Артикул	Количество
1.5 мм	Herbst TS / I / II, SUS ²	607-144-00	1 штг

CE



Отвертка для шестигранных винтов

Предназначена только для лабораторного использования

Ширина ключа	Предназначен для	Артикул	Количество
1.5 мм	Herbst TS / I	607-123-10	1 штг



Lined writing area consisting of 20 horizontal lines.