

# Внутри и внеротовые устройства

## Внеротовые устройства



### Головная тяга (шапочка) с защитным модулем

Защитные модули головной и шейной тяги помогают предотвратить случайное смещение лицевой дуги. Когда сила тяги начинает превышать норму (примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль автоматически отсоединяет лицевую дугу, предотвращая любые повреждения (например, лицевой дуги). Сборка конструкции проста для пациентов или их родителей. Тяга отстегивается простым нажатием

**Головная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!**

**Форма поставки:**

Головная тяга с защитным модулем.

Сила нагрузки	Модуль	Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	белый	джинсовая, синяя	<b>745-024-00</b>	1 шт
средняя до 6 Н (600 г)	темно-синий	джинсовая, синяя	<b>745-025-00</b>	1 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	голубой	джинсовая, синяя	<b>745-026-00</b>	1 шт

€€



### Головная тяга без защитных модулей

**Головные тяги всегда должны быть использованы с защитными модулями!**

Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	<b>745-027-00</b>	1 шт
хлопковая, синяя	<b>745-031-00</b>	1 шт
хлопковая, розовая	<b>745-032-00</b>	1 шт

€€



### Головная тяга с модулями для лечения с использованием подбородочной пращи

Головная тяга должна быть использована только с подбородочной пращей и эластическими цепочками

Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	<b>744-711-50</b>	1 шт

€€



### Шейная тяга с защитным модулем

Защитные модули головной и шейной тяги помогают предотвратить случайное смещение лицевой дуги.

Когда сила тяги начинает превышать норму (примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль автоматически отсоединяет лицевую дугу, предотвращая любые повреждения (например, лицевой дуги).

Сборка конструкции проста для пациентов или их родителей. Тяга отстегивается простым нажатием.

**Шейная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!**

**Форма поставки:**

Шейная тяга с защитным модулем.

Сила нагрузки	Шейная тяга	Модуль	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	джинсовая, синяя	белый	<b>745-020-00</b>	1 шт
средняя до 6 Н (600 г)	джинсовая, синяя	темно-синий	<b>745-021-00</b>	1 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	джинсовая, синяя	голубой	<b>745-022-00</b>	1 шт

€€

### Шейная тяга без защитных модулей

Шейная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Шейная тяга	Длина	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	180 мм	745-023-00	5 шт
хлопковая, синяя	180 мм	745-033-00	5 шт
хлопковая, розовая	180 мм	745-034-00	5 шт

CE



### Полоски для шейной тяги

Цвет	Длина	Артикул	Количество
4 x синих, 3 x черных, 3 x желтых	170 мм	744-112-01	10 шт
синий	170 мм	744-101-01	10 шт

CE



### Шейная тяга без защитного модуля (с подбивкой)

Шейные тяги всегда должны использоваться с защитными модулями

Шейная тяга	Длина	Артикул	Количество
синий / красный	180 мм	745-038-00	5 шт
красный / синий	180 мм	745-039-00	5 шт
синий / желтый	180 мм	745-041-00	5 шт

CE



### Защитные модули с металлическим зажимом

Для шейной или головной тяги.

Головные и шейные тяги всегда должны использоваться с защитными модулями

Сила нагрузки	Модуль	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	белый	745-028-00	10 шт
средняя до 6 Н (600 г)	темно-синий	745-029-00	10 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	голубой	745-030-00	10 шт

CE



### Металлическая клипса для защитного модуля

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 745-037-00	10 шт
--------------------	-------

CE



## Внеротовые устройства



### Головная тяга с подбородочной пращей

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.

Соединительная часть находится между подбородком и височной областью.

**Показания:**

- для раннего лечения мезиальной окклюзии
- при тенденции к обратному резцовому перекрытию в области одного или всех передних зубов

Подбородочная праща	Цвет	Артикул	Количество
эластичная, пористая, воздухопроницаемая	синий	<b>744-705-00</b>	1 шт
ригидная, короткие наружные крючки, воздухопроницаемая	синий	<b>744-709-00</b>	1 шт

CE



### Вертикальная головная тяга с подбородочной пращей

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.

Соединительная часть находится между подбородком и височной областью.

**Показания:**

- раннее лечение вертикальной резцовой дизокклюзии
- раннее лечение при тенденции к вертикальному росту лицевого отдела черепа

Подбородочная праща	Цвет	Артикул	Количество
эластичная, пористая, воздухопроницаемая	синий	<b>744-706-00</b>	1 шт
ригидная, короткие наружные крючки, воздухопроницаемая	синий	<b>744-710-00</b>	1 шт

CE



### Головная тяга “Nickham”

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.

Необходимая сила достигается использованием внеротовых эластиков (см. аксессуары)

**Показания:**

- для раннего лечения дистальной окклюзии с ретрузией резцов (глубокая резцовая окклюзия)
- для интрузии передних зубов
- для дистализации клыков / премоляров

J-крючки для Nickham головной тяги смотрите раздел аксессуары артикул 744-713-00

Цвет	Артикул	Количество
синий	<b>744-717-00</b>	1 шт

CE

### Универсальная головная тяга “Nickham”

Стандартная, подходит для всех размеров головы.

Делает возможной индивидуальную настройку направления силы.

Необходимая сила достигается использованием внеротовых эластиков (см. аксессуары)

**Показания:**

- для дистализации зубов (для создания места и лечения дистальной окклюзии)
- для интрузии/экструзии зубов (коррекция окклюзионной плоскости)
- для одновременной интрузии и ретрузии резцов
- верхнечелюстная прогнатия
- для двустороннего анкеража
- для лечения с удалением премоляров с полным закрытием промежутков и максимальным анкерожем
- коррекция положения средней линии

J-крючки для Nickham головной тяги смотрите раздел аксессуары артикул 744-713-00



Цвет	Артикул	Количество
синий	<b>744-712-00</b>	1 шт

CE

### Лицевые маски

Имеет опору на лоб и подбородок, способствуя вытяжению (тракции) верхней челюсти и верхнего зубного ряда кпереди, а также мезиальному смещению боковых зубов обеих челюстей.

**Показания:**

- раннее лечение мезиальной окклюзии
  - верхнечелюстная микро и ретрогнатия
  - нижнечелюстная макрогнатия
- уменьшение передней верхней лицевой высоты (глубокий прикус)
- протрузия (перемещение) отдельных или группы зубов вдоль дуги
- в случаях хейлогнатопалатосхизиса
- для мезиализации верхнечелюстного зубного ряда

Лобная накладка с ремешком и подбородочной пращой (см. аксессуары)



Обозначение	Артикул	Количество
Реверсивная головная тяга “Tubinger”	<b>745-300-00</b>	1 шт
Лицевая маска модель “Delaire”	<b>745-400-00</b>	1 шт

CE

### Noninium® лицевые дуги, medium

Не содержащие никель

(следовое содержание никеля  $\leq 0.2\%$  в связи с особенностями производства)

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

**Замечание о безопасности:**

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стоп петли	Защитные колпачки	Крючки для кльков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 мм / 45		белые			<b>740-000-00</b>	1 шт



CE

# Внутри и внеротовые устройства

## Внеротовые устройства



### Стандартные лицевые дуги, mini

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

**Замечание о безопасности:**

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 mm / 45		белые			<b>740-019-00</b>	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	<b>740-219-00</b>	1 шт

CE



### Стандартные лицевые дуги, medium

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

**Замечание о безопасности:**

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.00 mm / 40		белые			<b>740-010-00</b>	1 шт
1.15 mm / 45		белые			<b>740-020-00</b>	1 шт
1.15 mm / 45		белые	•		<b>740-120-00</b>	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	<b>740-220-00</b>	1 шт

CE



### Стандартные лицевые дуги, maxi

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

**Замечание о безопасности:**

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 mm / 45		белые			<b>740-021-00</b>	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	<b>740-221-00</b>	1 шт

CE

### Лицевая дуга со стопорными петлями, medium


Внутренняя дуга Ø: 1.15 мм / 45

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Размер наружной дуги	Размер внутренней дуги	Стопорные петли	Защитные колпачки / размер	Крючки для клыков	Артикул	Количество
49 мм	29 мм	83 мм	желтые/ размер 1		741-040-00	1 шт
49 мм	32 мм	90 мм	серые / размер 2		741-045-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные/размер 3		741-050-00	1 шт
49 мм	38 мм	104 мм	зеленые/размер 4		741-055-00	1 шт
49 мм	41 мм	111 мм	синие / размер 5		741-060-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные / размер 3	•	741-150-00	1 шт

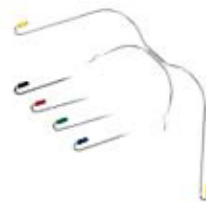

CE

### Лицевая дуга со стопорными петлями, medium

Лицевая дуга: пластиковое покрытие

Внутренняя дуга Ø: 1.15 мм / 45

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Размер наружной дуги	Размер внутренней дуги	Стопорные петли	Защитные колпачки / размер	Крючки для клыков	Артикул	Количество
49 мм	29 мм	83 мм	желтые/ размер 1		741-240-00	1 шт
49 мм	32 мм	90 мм	серые / размер 2		741-245-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные/размер 3		741-250-00	1 шт
49 мм	38 мм	104 мм	зеленые/размер 4		741-255-00	1 шт



CE

# Внутри и внеротовые устройства

## Внеротовые устройства / Аксессуары



### Подбородочная праща

Эластичная, пористая,  
воздухопроницаемая  
Цвет: синий

Артикул 744-614-00	1 шт
--------------------	------

CE



### Подбородочная праща

Ригидная, мягкая, с короткими крючками,  
воздухопроницаемая  
Цвет: синий

Артикул 744-613-00	1 шт
--------------------	------

CE



### Подбородочная праща

Ригидная, мягкая, с длинными крючками,  
воздухопроницаемая  
Цвет: синий

Артикул 744-615-00	1 шт
--------------------	------

CE



### Подбородочная праща

Для реверсивной головной тяги "Tubinger",  
воздухопроницаемая  
Цвет: синий

Артикул 745-304-00	1 шт
--------------------	------

CE



### Прокладка для подбородочной пращи

Позволяет сделать ношение подбородочной пращи более  
комфортным и избежать раздражения кожи подбородка

Артикул 744-616-00	10 шт
--------------------	-------

CE



### Прокладка для подбородочной пращи, Delaire

Для лба / подбородка  
Для лицевой маски Delaire  
(артикул 745-400-00), самоприклеивающаяся

Артикул 745-401-00	2 шт
--------------------	------

CE



### Тракционные накладки

Для головной тяги артикул 744-705-00 /  
744-706-00 / 744-709-00 / 744-710-00).  
Цвет: синий

Артикул 745-402-00	2 шт
--------------------	------

CE

### Головной ремешок эластичный, регулируемый

Для реверсивной головной тяги, модели "Tubinger"

Длина: 40 см

Артикул 745-302-00	5 шт
--------------------	------

€€



### Накладка для лба с ремешком

Для реверсивной головной тяги, модели "Tubinger"

Артикул 745-301-01	5 шт
--------------------	------

€€



### Головной ремешок

Для индивидуально подобранных головных тяг.

Цвет	Ширина	Длина	Артикул	Количество
синий	20 мм	22.50 м	744-601-00	1 шт

€€



### J-Крючки

С петлями для прямого воздействия силы на дугу

Для головной тяги (артикул 744-202-00).

Артикул 742-501-00	1 пара
--------------------	--------

€€



### J-Крючки для головной тяги Nickham

Для головных тяг артикул 744-712-00 и артикул 744-717-00.

Дополняется скользящими трубками и эластичными. Для ретракции клыков и премоляров

Артикул 744-713-00	2 шт
--------------------	------

€€





# Внутри и внеротовые устройства

## Внеротовые устройства / Аксессуары



### Dentalastics® внеротовая эластическая цепочка

Цвет	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	118 мм	774-300-00	10 шт

CE



### Внеротовые латексные эластики

Высокая эластичность и устойчивость к нагрузкам. Указанная сила проявляется, когда эластик растянут в три раза больше указанного внутреннего диаметра.

Силы тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
слабая 2.3 Н (227 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-203-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-204-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	9.5 мм / 3/8 дюйма	772-205-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	12.7 мм / 1/2 дюйма	772-206-01	1000 шт
сильная 4.5 Н (455 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-208-01	1000 шт
сильная 4.5 Н (455 г)	12.7 мм / 1/2 дюйма	772-210-01	1000 шт

CE 0483



### Губной бампер

С пластиковым экраном и крючком для межчелюстных эластиков

#### Показания:

- для дистализации моляров
- для стабилизации моляров в позднем сменном прикусе
- при вестибулярном наклоне (протрузии) передних зубов, вызванном давлением языка

Для трубок	Артикул	Количество
Ø 0.90 мм / 36	748-009-00	1 шт
Ø 1.15 мм / 45	748-114-00	1 шт

CE



### Стопорные трубки

Для лицевых дуг и губных бамперов

Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	2 мм	480-914-00	100 шт

CE



### Стопорные винты

По Ladani

Для лицевых дуг и губных бамперов

Внутренний Ø	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	480-918-02	10 шт

CE